

商品ラインナップ

ワンステップトイレ処理袋
レギュラー



30
枚入

品番：YS-290
商品サイズ：幅 550×高さ 420mm
パッケージサイズ：幅 280×高さ 310×厚さ 120mm
パッケージ重量：1.8kg
5,115円（税抜 4,650円）

ワンステップトイレ処理袋
長時間用



20
枚入

品番：YS-292
商品サイズ：幅 550×高さ 470mm
パッケージサイズ：幅 280×高さ 310×厚さ 85mm
パッケージ重量：1.3kg
4,180円（税抜 3,800円）

ワンステップトイレ処理袋
介護・防災 兼用



20
枚入

品番：YS-127
商品サイズ：幅 650×高さ 550mm
パッケージサイズ：幅 320×高さ 280×厚さ 85mm
パッケージ重量：1.3kg
3,850円（税抜 3,500円）



240
枚入

品番：YS-240
商品サイズ：幅 650×高さ 550mm
梱包サイズ：幅 550×奥行 325×高さ 520mm
梱包重量：15.6kg
オープン価格

在宅介護・病院・施設向け



衛生排泄用品カタログ ver.7



清潔で明るい介護環境づくりを応援します



泡タイプ 除菌消臭 フォーム



品番：YK-288
商品サイズ：直径 60×高さ 233mm
容量：400ml
1,650円（税抜 1,500円）

片手で使える
トイレペーパー
水に流せるティッシュタイプ



400枚(200組)×5パック

品番：YP-149
商品サイズ：幅 165×高さ 360×厚さ 100mm
パッケージ重量：1.1kg
オープン価格


導尿バッグ用カバー II



クラボウ
EBRIQ
抗菌・消臭

品番：YD-271
商品サイズ：幅約 400×高さ約 340mm
パッケージ重量：114g
4,620円（税抜 4,200円）

簡単組立トイレ オ・サンポレット

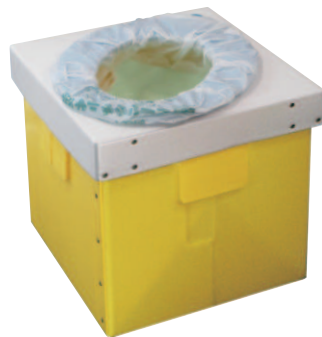

コンパクトに
折り置めます

品番：YT-275
組み立てサイズ：
幅 410×奥行 410×高さ 400mm
梱包サイズ：
幅 430×奥行 85×高さ 430mm
梱包重量：2kg 耐荷重：100kg
11,440円（税抜 10,400円）

腰上げしないで
使用出来る差込便器
らくらくクリーン



スリムタイプ
品番：YC-251
幅：165mm 受口幅：85mm
奥行：355mm 全高：258mm
内容量：1,000ml 重量：520g
13,310円（税抜 12,100円）



ワイドタイプ
品番：YC-250
幅：175mm 受口幅：140mm
奥行：355mm 全高：250mm
内容量：1,100ml 重量：560g
14,520円（税抜 13,200円）

株式会社 総合サービス
SINCE1982

お客様相談室：0120-980-329

受付時間：土・日・祝を除く 9:30～17:00

https://sservice.co.jp/
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-14-5

●カタログ中の商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
●商品改良等のため、仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

特許・実用新案登録済 日本製




株式会社 総合サービス
SINCE1982



心地よい排泄生活のご提案です

お悩みを抱えていませんか？


人間は毎日何度も排泄をします。それは当たり前の行為なのですが、少しでも不安があると、食事や飲み物までも控えてしまうことがあります。その悪循環が、身体に与える影響は数多く考えられるでしょう。排泄は健康のバロメーターです。相談がしにくい排泄のお悩みを、商品を使いながら、解決の糸口を見つけてみませんか？

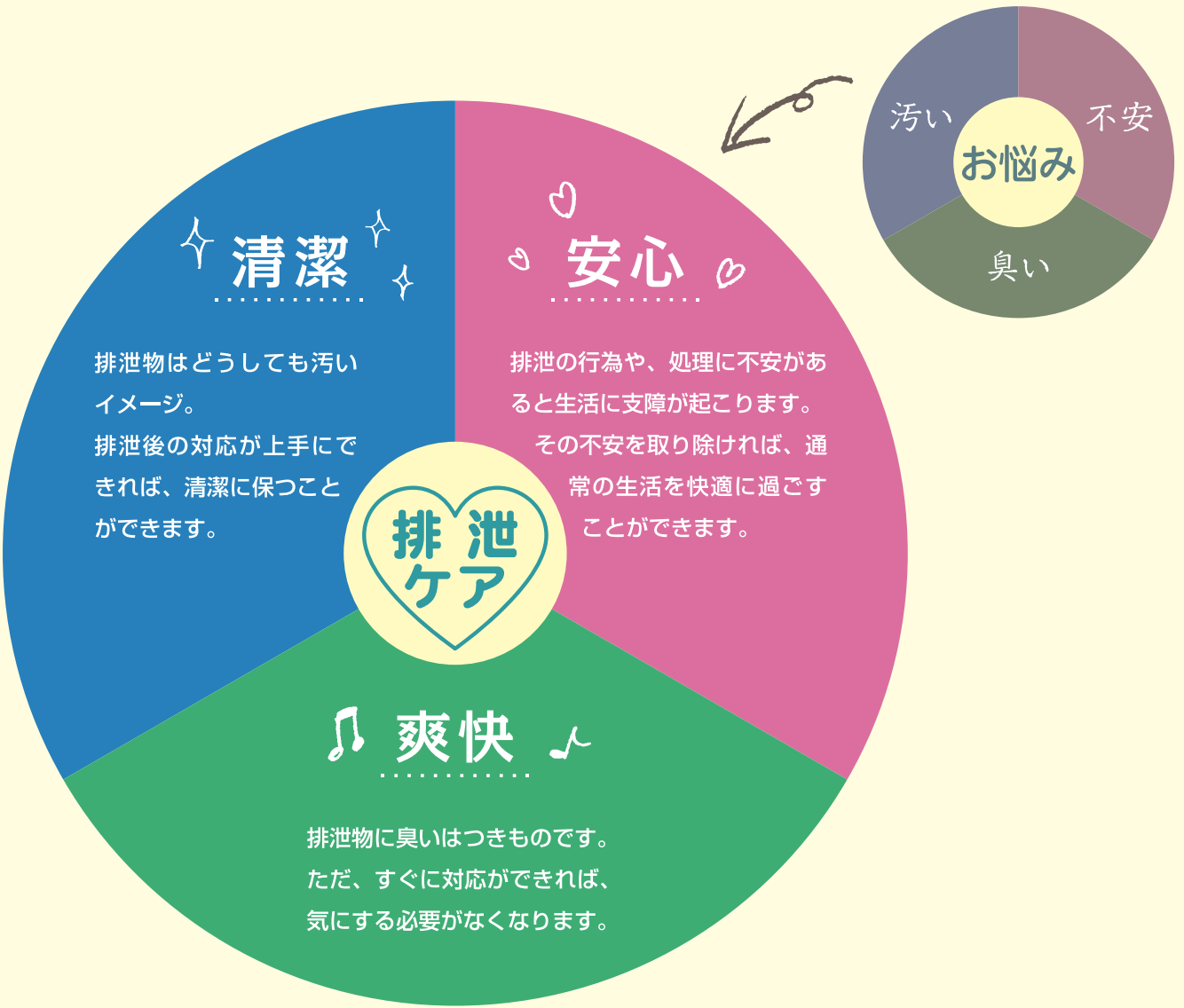

排泄は生きている証しであり、人間としての本質的な営みのひとつです。たとえ排泄障害があっても、正しく対処することで快適な生活を送ることができます。排泄は単に「下の世話」ではありません。人間の尊厳を守るケアなのです。

毎日の生活のさまざまなシーンで、弊社製品が活躍します

ワンズケアトイレ処理袋シリーズ			オ・サンポレット
レギュラー ▶6ページ	長時間用 ▶7ページ	介護・防災 兼用 ▶8ページ	▶14ページ
ポータブルトイレの後処理の軽減に！		感染対策や災害時に！	持ち運べる簡易組み立て便器！

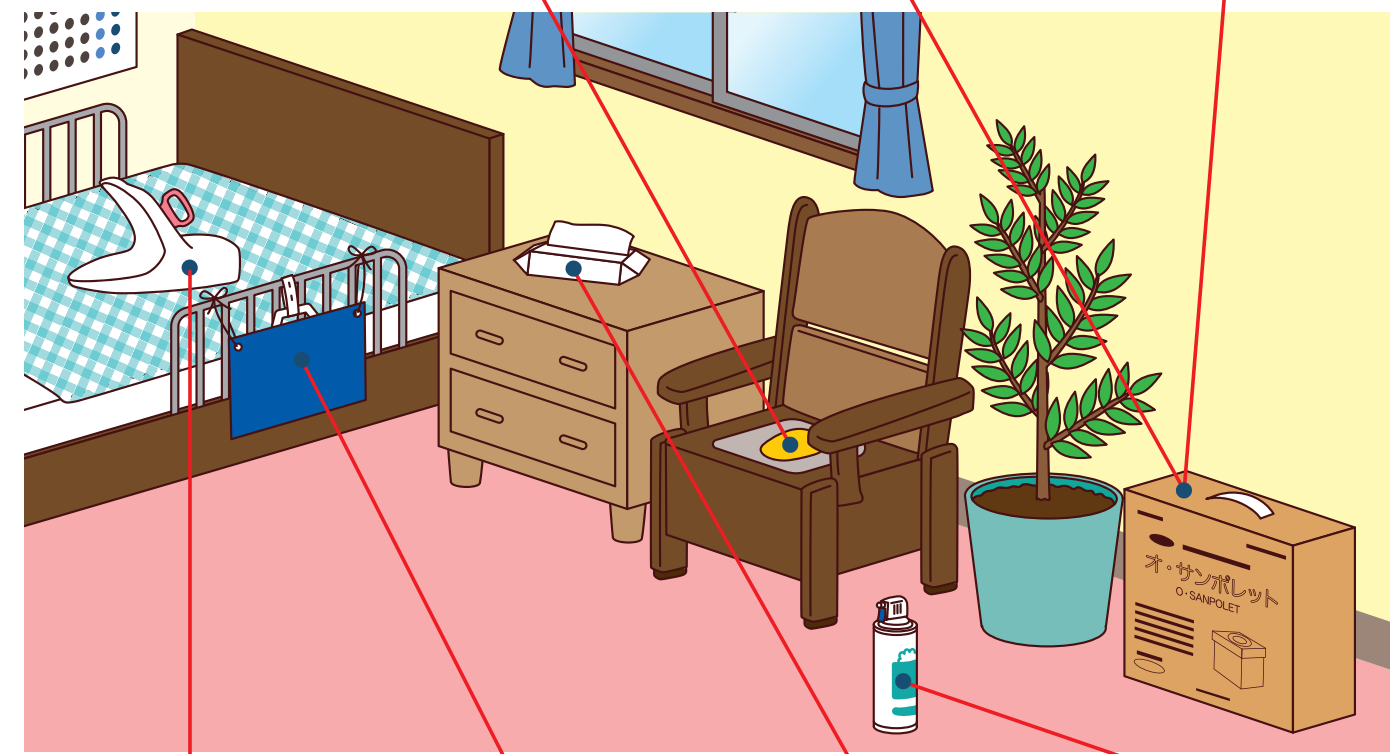

らくらくクリーン ▶15ページ	導尿バッグ用カバーII ▶13ページ	トイレペーパー ▶12ページ	泡タイプ 除菌消臭フォーム ▶11ページ
ベッドでおむつ以外で排泄したい方などに！	消臭・抗菌効果の優れたカバーです！	ティッシュタイプの片手で使えるトイレペーパーです！	使いやすいトリガー式！

ワンズケア® トイレ処理袋 シリーズ

ポータブルトイレの受バケツのバケツ処理を変えてみませんか？



ポータブルトイレ使用時のお悩み

- ポータブルトイレの洗浄が大変で洗う場所がない…
- 排泄時のバケツ処理に時間がかかる…
- 排泄物からの感染が不安で、できればバケツを触りたくない…
- ポータブルトイレの受バケツにニオイがついてしまう…
- ポータブルトイレから洗浄場所まで遠く、待ち運びが大変…
- いろいろな消臭剤を試してみたが、ニオイが部屋にこもってしまう…



処理袋使用のメリット

介護する方・される方のストレスを軽減

- セットからゴミ捨てまでの作業時間、約5分
- 介護者の心理的負担軽減・作業時間の効率化
- 排泄物からの飛沫感染防止（便からのウイルスなど）
- 独居や老老介護の負担軽減


ご自分で排泄ができるとADL（日常生活動作）の低下防止にも効果的

- 介助無しで排泄ができることで自信やプライドをキープ
- 寝たきりや意欲低下を予防
- 動くことにより筋力や身体機能を維持


特長

ミシン目から切り取って結びひもになります

ヒートシール
〈尿だまり防止加工〉
袋の両端に尿がたまりません

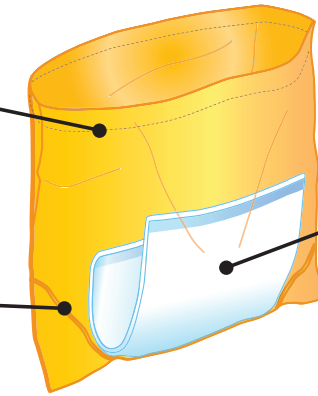

ポリマーが水分を吸収

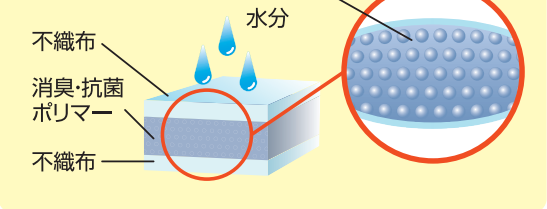

排泄ケアの作業時間比較

	バケツに水を張る場合 (1日2回ポータブルトイレのケア)	ワンズケア® トイレ処理袋 を使用した場合
作業時間	1回約15分×2回 = 約30分/1日 ▶1ヶ月で、約15時間	1日1枚使用 約5分/1日 ▶1ヶ月で、わずか2時間半

※自社調査データより ※袋の種類により、尿量の回数制限があります

ご使用方法

ご使用方法はとても簡単。排泄後のバケツを洗う手間が省けます。

ご使用のための準備

ご使用後の処理

ワンズケア
トイレ処理袋

レギュラー

長時間用

介護・防災兼用

トイレ処理袋
比較表

お客様の声

除菌消臭
フオーム

トイレペーパー

導尿バッグ
カバーII

オ・サンポレット
らくらくクリーン

ポータブルトイレ用

負担軽減(時間・手間・コスト)・感染対策

ワンズケア® トイレ処理袋 レギュラー



QRコード情報
トイレ処理袋レギュラー

準備も後処理も簡単、気持ちよく使えます



袋の大きさ：幅550×高さ420mm
吸水凝固シート：幅300×長さ500mm
吸水量：水道水で1,200ml(実験値)

中身が目立ちにくい
オレンジ色



5,115円(税抜4,650円)

30
枚入

特長

- 袋と抗菌ポリマー入り吸水凝固シートが一体化しセットも後処理も簡単
- 袋のサイズがポータブルトイレの受バケツにジャストフィット
- 中身が透けにくいオレンジ色で気持ちよく使える
- 使用後は紙おむつ同様に可燃ゴミとして処理が可能
※自治体のゴミ収集方式により異なる場合がございます
- 白い吸収シートで排泄物の色確認がしやすく、健康状態を把握しやすい
- 抗菌ポリマー入り吸水凝固シートの全面が長く、尿の跳ね返りを防止

吸収回数目安



こんな方におすすめ

- 1日のポータブルトイレの使用時間が短い方
- バケツ処理を手軽に安価に行いたい方

ポータブルトイレ用

負担軽減(時間・手間・コスト)・感染対策

ワンズケア® トイレ処理袋 長時間用



QRコード情報
トイレ処理袋長時間用

吸収量がレギュラータイプより 30%アップ



袋の大きさ：幅550×高さ470mm
吸水凝固シート：幅300×長さ500mm
吸水量：水道水で1,500ml(実験値)

中身が見えにくく、集積所でも
目立たないクリーム色



4,180円(税抜3,800円)

20
枚入

特長

- シートの吸収量は、従来品「ワンズケアトイレ処理袋レギュラー」より30%アップ
- 袋と抗菌ポリマー入り吸水凝固シートが一体化しセットも後処理も簡単
- 袋のサイズは「ワンズケアトイレ処理袋レギュラー」より少し大きめで処理時に手を汚さない
- 使用後は紙おむつ同様に可燃ゴミとして処理が可能
※自治体のゴミ収集方式により異なる場合がございます
- 白い吸収シートで排泄物の色確認がしやすく、健康状態を把握しやすい
- 抗菌ポリマー入り吸水凝固シートの全面が長く、尿の跳ね返りを防止

吸収回数目安



こんな方におすすめ

- 1回の尿量が多い方
- 頻尿、尿回数が多い方
- 袋の交換頻度を減らしたい方

ワンズケア
トイレ処理袋
レギュラー
長時間用
介護・防災兼用
トイレ処理袋
比較表
お客様の声
除菌消臭
フオーム
トイレペーパー
導尿バッグ
ペーパーII
オ・サンポレット
らくらくクリーン

負担軽減 (時間・手間・コスト) ・ 感染対策 ・ 災害時トイレ

ワンズケア® トイレ処理袋

介護・防災 兼用



QRコード情報
トイレ処理袋介護・防災兼用

洋式便器にも使えるポータブルトイレ処理袋



袋の大きさ：幅650×高さ550mm
吸水凝固シート：幅450×長さ300mm
吸水量：水道水で1,000ml(実験値)

通常はポータブルトイレの処理袋として。



災害時には普段トイレで用を足したい方にも。



袋をかぶせるだけ!!



20枚入

個人向けのお手軽品
3,850円(税抜 3,500円)



240枚入

病院・施設向けの
大容量品
オープン価格

特長

- 袋のサイズが大きく、受バケツ処理時に手を汚れにくい
- ポータブルトイレでの普段使いから、災害時トイレでも使用可
- ポータブルトイレ・差し込み便器処理時の感染対策として
- 通常の洋式トイレにも使用できるサイズ

吸収回数目安

1枚当り

排尿 **1~3** 回分

※災害時の衛生面を考慮しての目安回数で、できるだけ1回1枚で交換を推奨。(防災見地)

こんな方におすすめ

- 普段はポータブルトイレに、いざという時には災害用にも使いたい方
- 断水時でもいつものトイレで用を足したい方

毎日のご使用から、いざという時まで役に立つ

通常はポータブルトイレでの処理袋として使用しながら、震災はもちろん、台風などでの水害被害、真冬の大雪対策、アウトドアなどの外出時のトイレ対策としてもご使用いただけます。

ポータブルトイレ



受バケツにかぶせて使います。

オ・サンボレット



外出時のトイレ対策にも！
詳細は14ページをご覧ください。

洋式トイレ



袋のサイズが大きいため、そのまま広げて便座にかぶせるだけで簡単にご使用いただけます。

ワンズケア® トイレ処理袋 シリーズ 比較表

	ポータブルトイレ専用	ポータブルトイレ & 災害用には洋式便器併用	
	レギュラー	長時間用	介護・防災 兼用
	品番：YS-290	品番：YS-292	品番：YS-127 (20枚入) YS-240 (240枚入)
こんな方におすすめ	<ul style="list-style-type: none"> ● 1日のポータブルトイレの使用時間が短い方 ● バケツ処理を手軽に安価に行いたい方 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1回の尿量が多い方 ● 頻尿、尿回数が多い方 ● 袋の交換頻度を減らしたい方 	<ul style="list-style-type: none"> ● 普段はポータブルトイレに、いざという時には災害用にも使いたい方 ● 断水時でもいつものトイレで用を足したい方
入数	30枚入	20枚入	20枚入・240枚入
便袋のサイズ	幅 550mm × 高さ 420mm (バケツにぴったり大きさ)	幅 550mm × 高さ 470mm (バケツに対し少し余裕のある大きさ)	幅 650mm × 高さ 550mm (洋式トイレにも使える大きさ)
便袋の色	オレンジ色 (中身が目立ちにくい)	クリーム色 (透けない+集積所で目立たない)	白
吸収量	一枚でおしっこ 4~6 回分 水道水で1,200ml(実験値) 目安：尿の参考値は1,000ml ※多少の個人差はあります	一枚でおしっこ 6~8 回分 水道水で1,500ml(実験値) 目安：尿の参考値は1,300ml ※多少の個人差はあります	一枚でおしっこ 1~3 回分 水道水で1,000ml(実験値) 災害時にご使用になる場合は一回ごとに袋の交換をしてください。 ※多少の個人差はあります
オ・サンボレット (詳細は▶14ページ)	× 使用できない	× 使用できない	○ 使用できる
洋式トイレ	× 使用できない	× 使用できない	○ 使用できる
参考小売価格	5,115円(税抜 4,650円) / 30枚 1枚あたり155円 尿1回約 26~39円 (1枚を4~6回で計算)	4,180円(税抜 3,800円) / 20枚 1枚あたり190円 尿1回約 24~32円 (1枚を6~8回で計算)	3,850円(税抜 3,500円) / 20枚 オープン価格 / 240枚 1枚あたり175円 尿1回約 58~175円 (1枚を1~3回で計算)

詳細は▶6ページ

詳細は▶7ページ

詳細は▶8ページ

ワンズケア
トイレ処理袋

レギュラー

長時間用

介護・防災兼用

トイレ処理袋
比較表

お客様の声

除菌消臭
フォーム

トイレペーパー

導尿バッグ
パーII

オ・サンボレット
らくらくクリーン

ワンズケア® トイレ処理袋 シリーズ

をご使用のお客様の声

※2016年8月弊社実施のアンケート調査より一部抜粋

85歳の父が母の介護をするようになったので、少しでも負担を軽減できるものをネットで探して見つけました。
ポータブルトイレの処理に最適です。

大阪府 Tさん (女性)



1F 寝室にトイレがないため、夜中のみ使用。足腰が悪いので、後処理が楽。助かっています。

東京都 Kさん (女性)



いろんな商品を使いましたが、紙(袋)の漏れは一切なく安心して使えます。吸収力もよく、上部が切り取れて縛れるのもよく考えられています。

静岡県 Mさん (女性)



バケツが汚れず運ぶ時こぼれず便利になりました。

京都府 Dさん (男性)



衛生的でとても便利に利用しています。ひもとして取り外せるところがとても便利です。今後もずっと使います。(介護人より)

石川県 Mさん (女性)



脱臭すごく良い。取り付けやすく良い。手が汚れなくて良い。

栃木県 Aさん (女性)



夜間の尿回数が多いので助かります。寝室は悪臭に悩むことなく助かります。

群馬県 Sさん (男性)



袋と凝固シートが一体化しているのでシートがずれることがなく使いやすいです。

岐阜県 Tさん (女性)



自分でも簡単に処理できるので便利です。

神奈川県 Kさん (女性)



泡タイプ 除菌 消臭 フォーム

使いやすい トリガータイプ



QRコード情報
除菌・消臭フォーム

最長72時間効果が持続 ミクロの泡で爽やか消臭・除菌

大容量タイプ



どんな角度でもスプレーできるノズルを採用しました。多くの介護施設、病院でご利用いただいています。

特長

- 最長 72 時間効果が持続 (ワンズケア併用時のドライ状態の場合)
- 水の上では約 18 時間有効、ポータブルトイレでも一晩中泡が持続 ※ポータブルトイレの受バケツに水を張った状態
- 環境にも人にも優しい天然植物由来素材を使用
- 水溶性天然成分のため、トイレに流せて環境への負担が少ない

ご使用方法

- ① 初めて使用する前、天部分の青い小さなロックを除去します。
- ② 毎回、使用前はよく振ってからご使用ください。

トイレ処理袋と併用した場合

72時間経過後も除菌・消臭効果が持続します。



受バケツにワンズケアをセットします。

排泄します。

除菌・消臭フォームを噴泡すると排泄物が隠れます。

72時間経過していますが、泡は十分残っています。

ポータブルトイレの受バケツに水を張った場合

48時間経過後は泡が消えてしまうので、下水などへの負荷がありません。



受バケツに水を張り、水を張ります。

除菌・消臭フォームを水面上に噴泡します。

24時間経過していますが、泡はまだ十分残っています。

48時間経過しましたが、水溶性のため泡は消えています。

液性：弱アルカリ性
 成分：脂肪酸アミン誘導体、植物由来消臭剤、除菌成分、LPG
 型式：エアゾール
 サイズ：直径 60×高さ 233mm
 容量：400ml(80 回分*)
 ※3 秒間スプレーした場合です。
 使用量により変わります。
 1,650 円 (税抜 1,500 円)

トイレ処理袋

ワンズケア

ワンズケア
長時間用

サンタクリーン
ワンズケア

トイレ処理袋

トイレ処理袋

除菌消臭
フォーム

トイレペーパー

導尿バッグ用
カバーII

オ・サンポレット
らくらくクリーン

片手で使える トイレペーパー



QRコード情報
トイレペーパー

片手でスルッと取り出せて トイレに流せるティッシュタイプ



特長

片手でラクラク取り出し

- 片麻痺の方や手の力が弱い方でも取り出しやすいティッシュタイプ
- 肌触りがよく、片手でおむつ交換時のお尻拭きにも最適

水に流せるので安心!

- 60秒で水に溶ける JIS 規格準拠だからトイレに流せて清潔で安心

小型で持ち運びに便利

- コンパクトで外出時などの持ち運びも簡単



ペーパー(2枚組)：160×200mm
枚数：400枚(200組)×5パック
材質：再生紙
オープン価格



ポータブルトイレ
ご使用時に



おむつ交換時に



外出時のトイレで



導尿バッグ用カバーⅡ



QRコード情報
導尿バッグ用カバーⅡ

透けない、臭わない、目立たない! 利用者様のプライバシーと安心をガード

抗菌・消臭
機能素材「イブリック®」が細菌の増殖や悪臭を軽減

長期効果
高い洗濯耐久性
倉敷紡績(株)の繰り返し洗濯テストで、通常洗濯機使用による100回洗濯後でも消臭・抗菌の効果が実証されています。

安心・便利
カバーを吊り下げられるハトメ付き

簡単装着
装着しやすい2分割のマジックテープ

使いやすい
横合わせ部分は確認しやすいスナップボタン

サイズ：幅約400×高さ約340mm
生地：天然繊維に電子線グラフト重合処理(「クラボウ」[EBRIQ®]使用)繊維上の黄色ブドウ球菌やアンモニア臭などに対して高い効果があります。
ハトメ：アルミニウム
4,620円(税抜4,200円)




特長

- 消臭・抗菌性に優れた生地を使用
- 導尿バッグを目立たなくして利用者の心理負担を軽減
- 導尿バッグの廃液チューブによる尿路感染を予防
- スナップボタンとマジックテープを使用し、装着や確認がしやすい構造
- 繰り返し洗濯しても効果が持続

抗菌作用

繊維上の黄色ブドウ球菌などに対して高い抗菌効果があります。繊維製品の球菌性試験方法(JISL 1902)準拠データ提供ロウギク

細菌接種直後 → 12時間後
細菌が減少

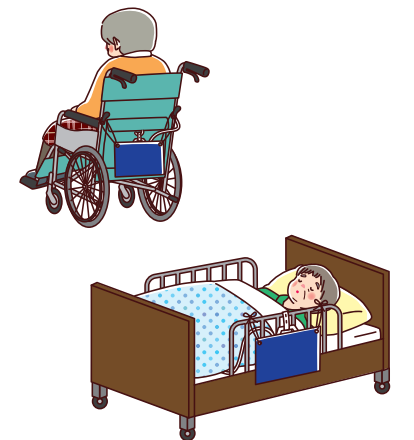

トイレ処理袋
ワンスケア
ワンスケア
長時間用
サンタクリーン
ワンスケア
トイレ処理袋
トイレ処理袋
除菌消臭
フオーム
トイレペーパー
導尿バッグ用
カバーⅡ
オ・サンボレット
らくらくクリーン

簡単組立トイレ


オ・サンポレット

特定福祉用具
対象商品



QRコード情報
オ・サンポレット

収納・持ち運びラクラク、水も電気も いらないお出かけ用簡易トイレ(組立式)

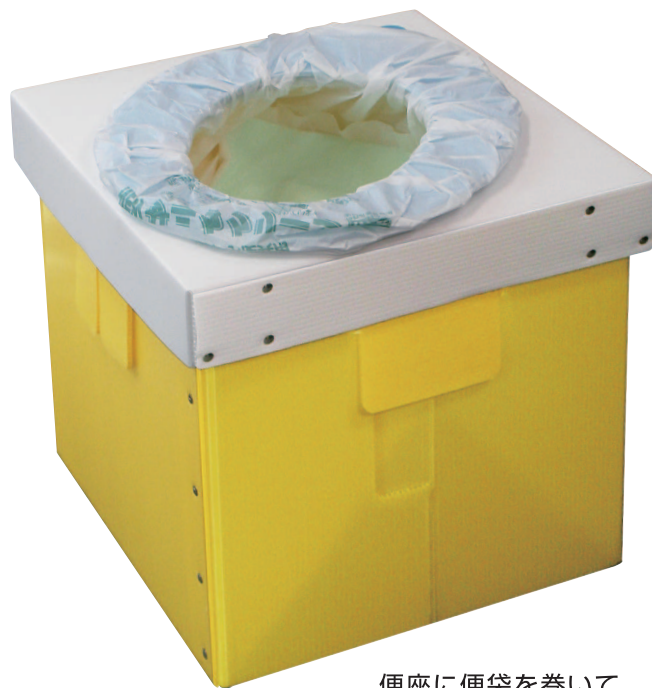

便座に便袋を巻いて
排泄します。

特長

- 組み立て所要時間約1分、折り畳みも簡単
- 100kgまでの荷重に耐える強度を備え、軽くて丈夫
- 要介護の方の外出時に
- 災害時の緊急トイレにも利用可能
- 繰り返し使用可能

セット内容：オ・サンポレット本体、お試しトイレ処理袋 2枚
 組立サイズ：幅 410×奥行 410×高さ 400mm
 梱包サイズ：幅 430×奥行 85×高さ 430mm
 素材：ポリプロピレン、低発泡ポリシート
 素品重量：1.7kg (梱包重量：2kg)
 耐荷重：100kg
 11,440円 (税抜 10,400円)

持ち運びに便利

コンパクトに折り畳んで持ち運べますので、お出かけの時や、お部屋での収納にも大変便利！



専用キャリーケース

処理袋仕様で清潔

「ワンズケアトイレ処理袋」との組み合わせで、いつも清潔できれいなトイレ環境。しかも簡単に組み立てられ、軽くて丈夫！

お試しトイレ処理袋 (2枚入り)



本商品に付属していますので、すぐにお使いいただけます。(商品の詳細は8ページへ。)

腰上げしないで
使用出来る差込便器

らくらくクリーン



QRコード情報
らくらくクリーン

腰(臀部)の骨折などで腰を上げられない、 股関節が開きにくい方にオススメです！



スリムタイプ

ワイドタイプ

腰上げしないで便と尿を採れる 差し込み式尿器

「らくらくクリーン」は治療目的、体力低下などで腰上げができない方が、おむつをしないで気持ち良く排泄できる男女共用の便尿器です。なお、便意、尿意を介護者に伝えられる方が使用できます。

※この製品は財団法人テクノエイド協会の福祉機器開発助成制度により研究開発したものです。

こんな方におすすめ

- 腰(臀部)の骨折などで腰を上げられない方
- 股関節が開きにくい方
- ベッドでおむつ以外で排泄したい方



スリムタイプ


幅：165mm
 受口幅：85mm
 奥行：355mm
 全高：258mm
 内容量：1,000ml
 重量：520g
 素材：(本体)ポリエチレン樹脂、(グリップ)ポリプロピレン樹脂、(金具)ステンレス
 耐熱温度：60℃
 耐冷温度：-20℃
 13,310円 (税抜 12,100円)

ワイドタイプ

幅：175mm
 受口幅：140mm
 奥行：355mm
 全高：250mm
 内容量：1,100ml
 重量：560g
 素材：(本体)ポリエチレン樹脂、(グリップ)ポリプロピレン樹脂、(金具)ステンレス
 耐熱温度：60℃
 耐冷温度：-20℃
 14,520円 (税抜 13,200円)


使用方法

挿入方法

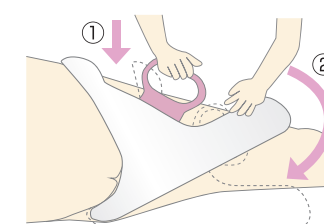


大腿部を開いてから用具の先端を布団に押し付けながら陰部をすくうように挿入します。ご本人は腰を上げようとしなくてください。

挿入の目安

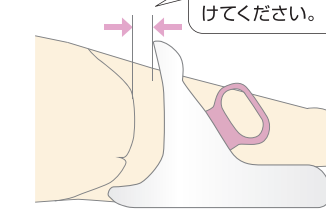

ワイドでは約10cm、スリムでは約4cm空けてください。
 あらかじめお尻の下にティッシュなどを敷いておくことで安心です。本体挿入後、片足をタンク上に乗せて安定させます。足を乗せられない人は砂のうを乗せて固定します。男性はペニスの下にティッシュペーパーを挟むと尿が前方に流れます。

排泄後の処置

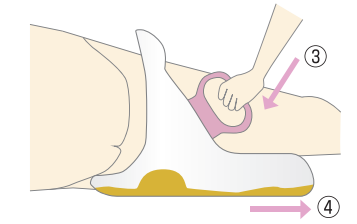

受け口部を下げないように用具を下に押し付けながら、静かに後方に抜き出します。内部の排泄物は適切に処理してください。